


Date d'édition : 07.01.2026

Ref : P5.8.8.4

P5.8.8.4 Anémométrie Laser Doppler

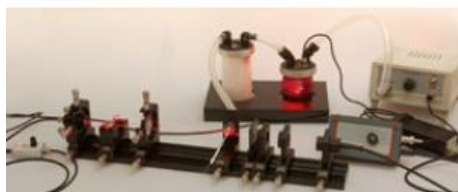

La vélocimétrie laser Doppler est une technique qui permet de mesurer la vitesse sans contact en un point d'un écoulement (fluide, gaz).

L'expérience P5.8.8.4 consiste à réaliser un vélocimètre ou anémomètre laser Doppler.

Des gouttelettes d'eau dans le volume de mesure sont éclairées par la lumière d'un laser.

La lumière diffusée est décalée en fréquence par l'effet Doppler.

Le décalage en fréquence est déterminé puis converti en vitesse des particules ou vitesse d'écoulement.

Les gouttelettes d'eau sont trop fines pour adhérer aux surfaces avoisinantes, elles vont juste s'évaporer ou rebondir à cause de la tension superficielle.

Équipement comprenant :

- 2 474 104 Objectif de focalisation, $f = 60$ mm
- 1 474 107 Support de plaques filtrantes
- 1 474 187 Séparateur de faisceau VLD
- 1 474 1876 Déviation du faisceau et focalisation VLD
- 1 474 188 Buse de diffusion de brume sur cavalier
- 1 474 315 Nébuliseur, ultrasons
- 1 474 194 Support pour fibre ST, C25
- 1 474 5350 Câble patch, connecteurs ST-ST, 600 μ m
- 1 474 3314 Photodétecteur 400...1100 nm
- 1 474 5464 Oscilloscope à mémoire numérique, 100 MHz, à deux canaux
- 1 501 06 Câble HF, BNC-BNC, 1,5 m
- 1 501 061 Câble HF, BNC-Mini BNC, 1,5 m
- 1 474 128 Module laser à diode
- 1 474 5442 Rail profilé 500 mm
- 1 474 209 Plaque de maintien C25, avec cavalier
- 2 474 251 Valise de transport et de rangement #01
- 1 474 7115 LIT-print: Anémomètre laser à effet Doppler, anglais
- 2 471 828 * Lunettes de réglage pour laser He-Ne

Les articles marqués d'un * ne sont pas obligatoires, mais sont recommandés pour la réalisation de l'expérience.



Date d'édition : 07.01.2026

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Optique > Photonique > Applications techniques

Options

Ref : 471828

Lunettes de réglage pour Laser He-Ne

Pour tête laser He-Ne 5 mW (471 821). Protège les yeux contre la lumière et des réflexes diffusés.



Pour la lampe torche laser He-Ne 5 mW (471 821).
Protège les yeux de la lumière et des reflets diffus.

Caractéristiques techniques :

Monture: LGF

Filtre: Red Diode

Gamme de longueurs d'onde: visible

Matériau du filtre: polymère

Couleur du filtre: bleu ciel

Transmission de la lumière naturelle: 52%

Densité optique: 625 ... 680nm DO1-2

Certification EN208: 630-635 R1

Ref : 474104

Lentille en verre biconvexe dans support et cavalier, f = 60 mm



Lentille en verre biconvexe dans support et cavalier.

Par exemple pour la focalisation d'un faisceau laser dans un cristal de Nd:YAG (4745310).

Pour le montage sur le banc d'optique, la lentille est dans une monture à clipser et un cavalier pour le banc d'optique.

Caractéristiques techniques :

Distance focale : 60 mm

Monture : C25

Matériel livré :

Lentille dans• C25

Plaque support C25 sur cavalier 20 mm•(474209)

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.leybold-didactique.fr



Date d'édition : 07.01.2026

Ref : 474107
Support de plaques filtrantes



Pour le logement de plaques filtrantes ou de diapositives au format 50 x 50 mm.
Deux vis ajustables maintiennent les objets en place et permettent le réglage de différentes épaisseurs.
Sur un cavalier pour le banc d'optique.

Caractéristiques techniques :
Épaisseur de plaque maximale : ≤ 3 mm

Ref : 474128
Diode laser module, 532 nm (green)



Laser à diode rouge à luminosité réglable. Le laser est décalé latéralement afin de générer avec le séparateur de faisceau 474187 deux faisceaux symétriques, par exemple pour une anémométrie laser Doppler.
Dispositif d'ajustage X,Y - Z, f pour l'orientation du faisceau inclus.

Caractéristiques techniques :

Longueur d'onde : 635 nm
Puissance : 30 mW
Classe laser : 3B



Date d'édition : 07.01.2026

Ref : 474187

LDA Beam Splitting Assembly



Séparateur de faisceau et mécanisme de renvoi pour la réalisation d'un dispositif de vélocimétrie laser à effet Doppler VLD (ou anométrie laser Doppler).

Le faisceau laser déjà décalé latéralement provenant de 474128 est divisé et transmis parallèlement au faisceau laser initial.

Ajustage possible de la direction de propagation du faisceau.

Ref : 474186

LDA Beam Deflection and Focussing



Lentille plan-convexe dans support pour faire converger les deux faisceaux en un point où se forment les franges d'interférence avec un dispositif de vélocimétrie laser à effet Doppler VLD (ou anométrie laser Doppler). La lentille est déplaçable sur deux axes à des fins d'ajustage.

Caractéristiques techniques :

Distance focale : 150 mm

Ref : 474188

Ultrasonic particle seeder



Buse de sortie de la brume produite par le nébuliseur 474315 .

Des capuchons de buse de différents diamètres et le fonctionnement sans capuchon permettent une adaptation de la finesse de la brume à différentes situations (ajustage, mesure) et la production de différentes vitesses.

Date d'édition : 07.01.2026

Ref : 474194

Support pour fibre ST, dans monture C25



Support pour fibre sans composant optique pour positionner une fibre optique ST dans une monture C25. S'utilise en principe pour procéder à la première étape de l'ajustage de deux collimateurs se faisant face.

Ref : 474209

Cavalier 20 mm pour composant optique C25



Plaque de maintien sur cavalier.

Permet l'utilisation de composants optiques de 25 mm de diamètre (C25).

Trois billes à ressort assurent une bonne fixation et un positionnement reproductible du composant.

Les composants peuvent être utilisés d'un côté comme de l'autre, au choix.

Ref : 474251

Valise de rangement et de transport pour expériences en photonique



Intérieur rembourré de mousse alvéolée pour le transport sécurisé et le rangement de composants optiques fragiles.

Une coque rigide en plastique garantit une excellente protection.



Date d'édition : 07.01.2026

Ref : 474315
Ultrasonic Particle Nebuliser



Produit une brume composée de gouttelettes extrêmement fines. L'alimentation génère un flux d'air réglable et alimente le nébuliseur dans un bain-marie. Un deuxième récipient permet l'élimination des grosses gouttes d'eau de façon à ce que seulement les fines gouttelettes parviennent à la sortie.

Ref : 4743314
Photodétecteur 400...1100 nm



Ref : 4745350
Patch cable ST-ST 600 µm





Date d'édition : 07.01.2026

Ref : 4745442

Banc d'optique à la base de tous les montages 500 mm



Le profilé à queue d'aronde permet la mise en place de cavaliers appropriés ainsi que leur déplacement précis.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 500 mm

Matériau : aluminium anodisé

Ref : 4745464

Oscilloscope numérique , 2x voies



Oscilloscope numérique, opération facile à utiliser.

Caractéristiques techniques :

Bande passante: 100 MHz

Taux d'échantillonnage: 1 GSa/s

Résolution: 8 bits

512k points de mesure par canal

Canals: 2

Gain: 2 mV/cm ... 10 V/cm, CA/CC

Affichage: 14,4 cm TFT, 320 x 234 pixels

Dimensions: 303 mm x 154 mm x 133 mm

Poids: 2,5 kg



Date d'édition : 07.01.2026

Ref : 4747115

Manual Laser Doppler Anemometer

Manual for experiment P5.8.8.4

Ref : 50106

Câble de connexion BNC-BNC en câble RG-174, fin et très flexible.



Caractéristiques techniques :

Fiche : BNC / BNC

Impédance : 50 ohms

Ref : 501061

HF-Cable, BNC-Mini BNC, 1.5 m

Les câbles de connexion Mini BNC-BNC en mince, très souple câble RG-174, par exemple pour 474 302 .

Caractéristiques techniques :

Connecteurs : Mini BNC / BNC

Impédance : 50 ohms